


Schmerztherapie (TENS)

Die **t**ranskutane **e**lektrische **N**erven**s**timulation (TENS) ist eine nebenwirkungsfreie Reizstromtherapie zur Behandlung von Schmerzen. Neben der Nutzung des Gate-Control-Effektes lindert eine erhöhte Endorphinproduktion und -ausschüttung das Schmerzempfinden.

Eine bessere Durchblutung in der angewendeten Region wirkt außerdem entspannend auf die Muskulatur.

- Programm 1 Programm _____
 bis zu 3 x täglich _____
 Termin am _____ Uhrzeit _____

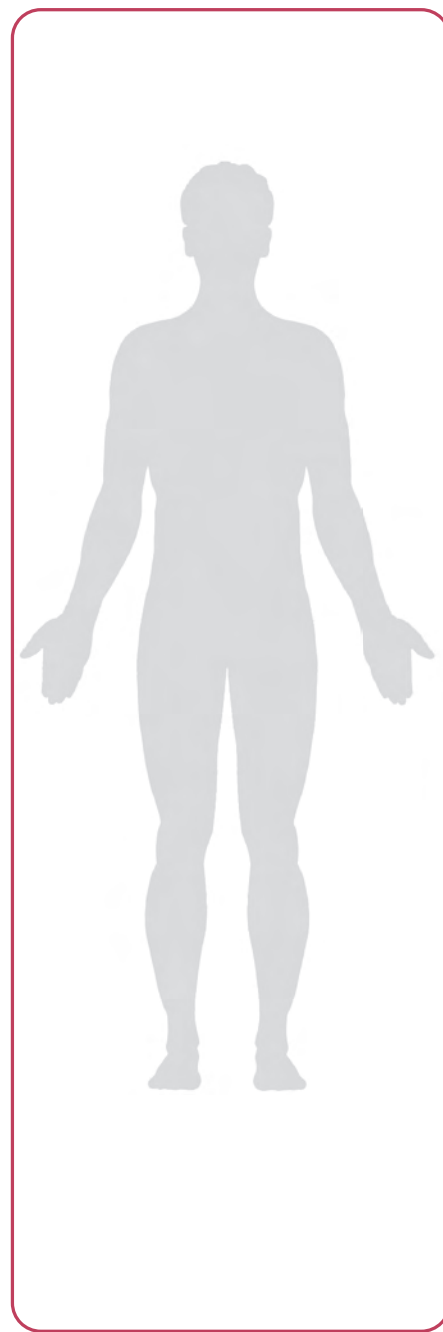

Sprechen Sie mit uns!

Medizintechnik Rostock GmbH
 Kamenzer Damm 78 · 12249 **Berlin**
 Tel: 030/66 99 10-0 · Fax: 030/66 99 10-10
 info@mtronline.de · www.mtronline.de

Medizintechnik Rostock GmbH
 Zur Himmelspforte 1 · 18055 **Rostock**
 Tel: 0381/4 66 99-0 · Fax: 0381/4 66 99-18
 mtr@mtronline.de · www.mtronline.de





Kleine Einführung hier



Programm / Modus	Beschreibung	Frequenz	Pulsweite	Laufzeit
01 / MOD	Der modulierte TENS-Modus bietet ein angenehmes, wellenartiges Kribbeln mit geringem Gewöhnungseffekt, ideal für häufige Anwendung.	70–110Hz	200–100µS	30 Min.
02 / CONT	Das gleichbleibende Kribbeln führt zu einer schnellen Schmerzlinderung durch Aktivierung der körpereigenen Schmerzblockade.	110Hz	175µS	30 Min.
03 / BURST	Im Burst-Modus bewirken sanfte, pochende Impulse eine erhöhte Endorphinausschüttung für eine längere Wirkungsdauer.	80Hz	150µS	30 Min.
04 / HAN	Im Han-Modus führt die Kombination der Programme 2 und 3 zu erhöhter Endorphinausschüttung und schneller Schmerzlinderung.	100 / 2Hz	200 / 350µS	30 Min.
05 / W/R	Der W/R (Work/Rest) Modus ist ein klassisches EMS Programm zur Muskelkräftigung.	50Hz	300µS Arbeitszeit: 10Sek. Ruhezeit: 20Sek.	20 Min.
06 / Wählbar	In diesem Modus können die Paramater frei eingestellt werden.	1–150Hz	50–350µS	1–599 Min.